



CABO KEELER POCKET




LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

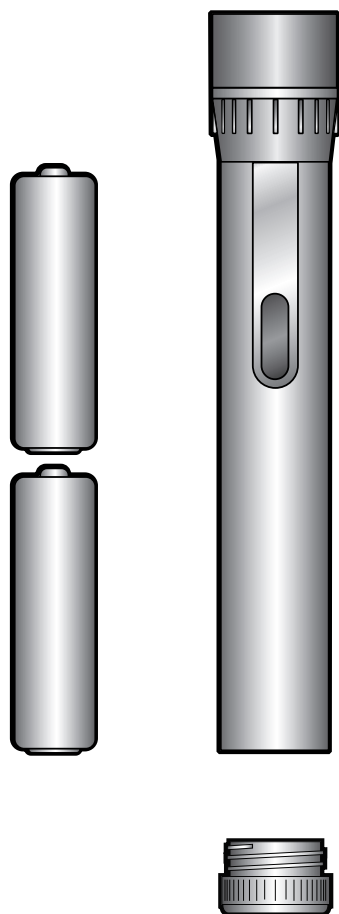

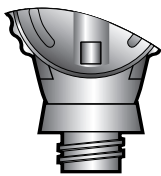

Ligação da cabeça dos instrumento ao cabo

A ligação entre a cabeça do instrumento e o cabo é uma rosca. Para ligar a cabeça do instrumento, instale-o como apresentado e rode no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que a ligação entre a cabeça e o cabo é positiva.

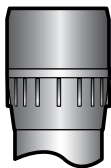

Compatibilidade

Os retinoscópios e os oftalmoscópios Specialist, Professional, Standard e Practitioner são compatíveis com os Keeler Vista 2,8v e cabos Keeler 3,6v.



DESLIGAR LIGAR

Ligar/desligar o controlo de intensidade

Para ligar o instrumento, rode o controlo de intensidade como indicado para a direita. Para desligar o instrumento, rode o controlo de intensidade como indicado para a esquerda.

Inserir/Substituir baterias

Desenrosque a tampa das baterias, coloque as baterias e volte a colocar a tampa, como apresentado.

Devem ser utilizadas as seguintes baterias secas:

Cabo Keeler Pocket - 2 x 1,5 AA pilhas de células secas - Duracell MN 1500 ou equivalentes.

Instruções de limpeza

Para este instrumento, só deve ser utilizada a limpeza manual, sem mergulhar, como descrito abaixo:

1. Limpe a superfície externa com um absorvente limpo, pano macio humedecido com água/solução detergente (2% de volume) ou água/álcool isopropílico (70% por volume).
2. Certifique-se de que a solução em excesso não entra para o instrumento. Tenha cuidado para se certificar de que o pano não está saturado com solução.
3. As superfícies devem ser cuidadosamente secas à mão, utilizando um pano macio e limpo.
4. Elimine com segurança os materiais de limpeza utilizados.

Garantia e Assistência

Não existem peças que possam ser substituídas pelo utilizador – qualquer acção de manutenção preventiva e assistência tem de ser efectuada por representantes autorizados da Keeler.

Os cabos Keeler tem uma garantia de 3 anos e será substituído ou reparado gratuitamente de acordo com o seguinte:

1. Qualquer falha deve-se a defeito de fabrico
2. A prova de compra acompanha qualquer reclamação.

FABRICADO NO R.U. POR:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

Inglaterra

Tel: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 857177

LINHA VERDE: 0800 521 251

DISTRIBUÍDO POR:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, EUA

Número verde: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

A marca CE deste ☐
produto indica que foi ☐
testado e está em ☐
conformidade com as ☐
provisões da Directiva ☐
sobre Dispositivos ☐
Médicos 93/42/CEE



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distribuidor